



Plan de coupe pour le plateau tibial

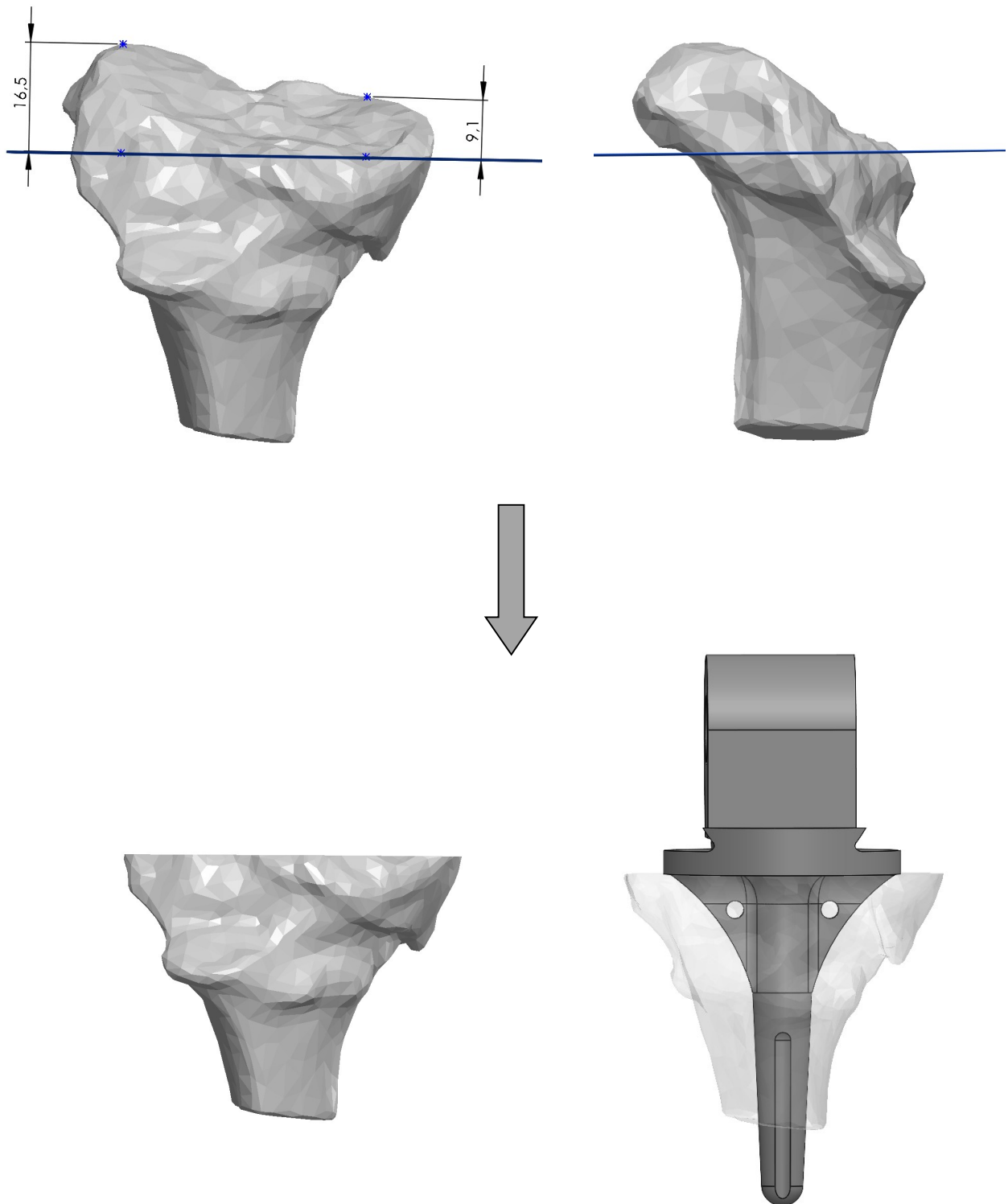


Pour l'indice B, deux options sont proposées : une version centrée sur le milieu du tibia sur la face antérieure et une version adaptée à la partie interne du tibia.

Dans les deux cas, le guide de coupe est confectionné sur-mesure en intégrant une empreinte de l'os du patient pour que le dispositif s'ajuste facilement au bon endroit. Le guide comprend une fente pour la lame-scie, des perçages pour des broches $\varnothing 2.5$ et pour un foret $\varnothing 5$. Un perçage fileté pour fixer un manche est également ajouté pour faciliter la prise en main.

Guide de coupe – Option n°1

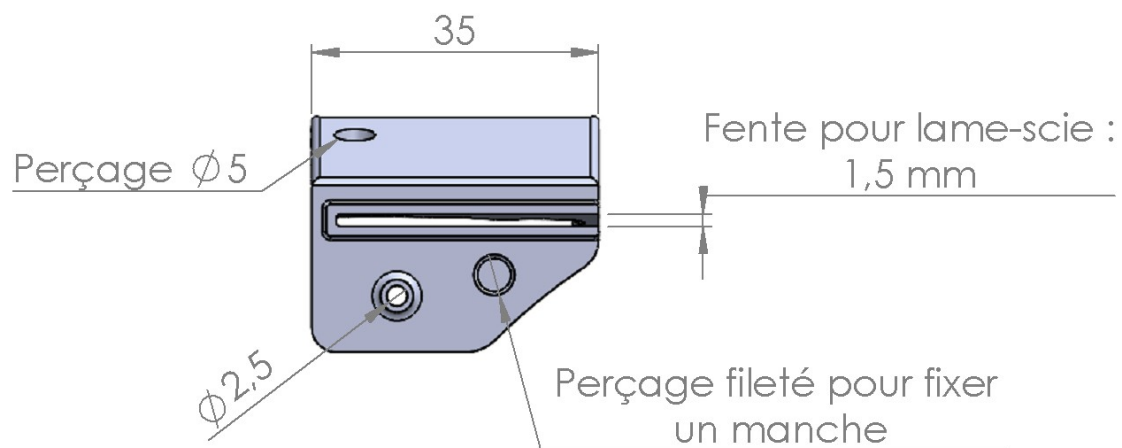



Vue antérieure

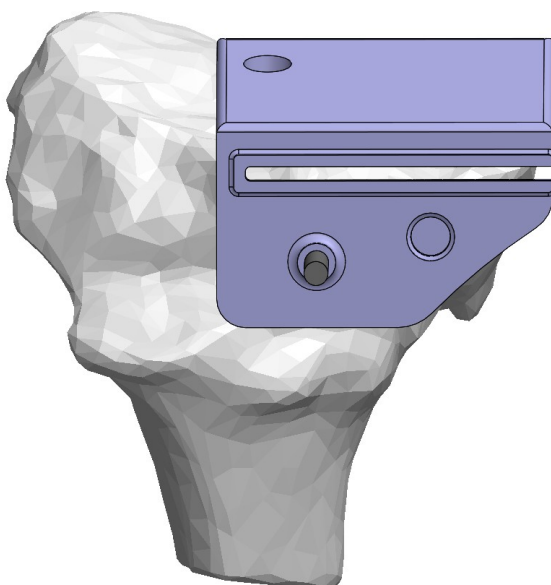



Vue postérieure




Vue externe

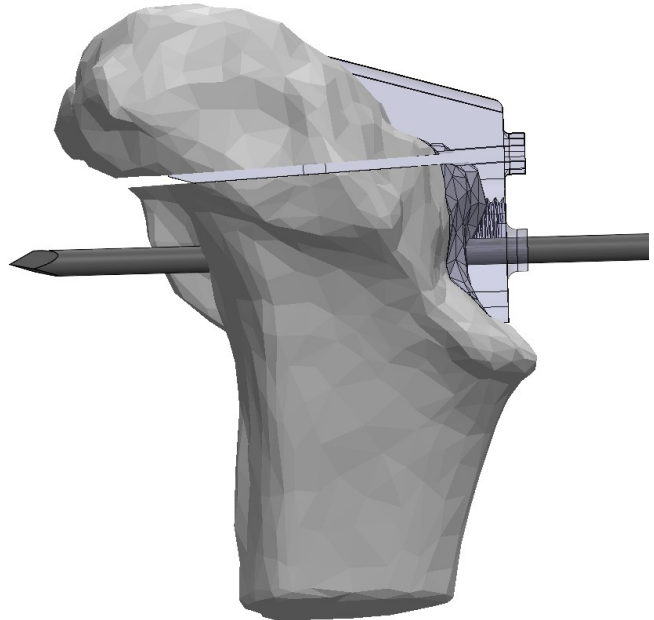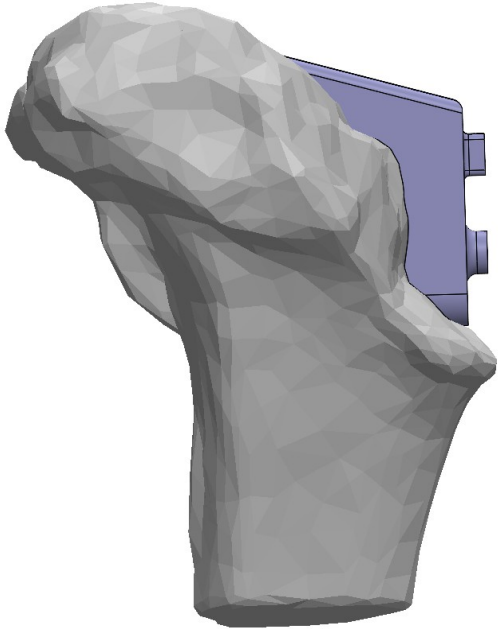


Vue interne

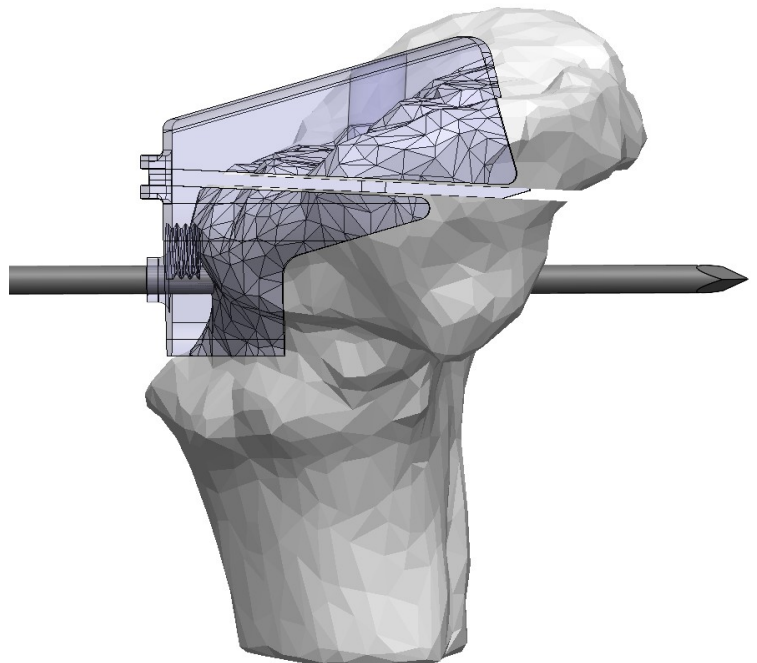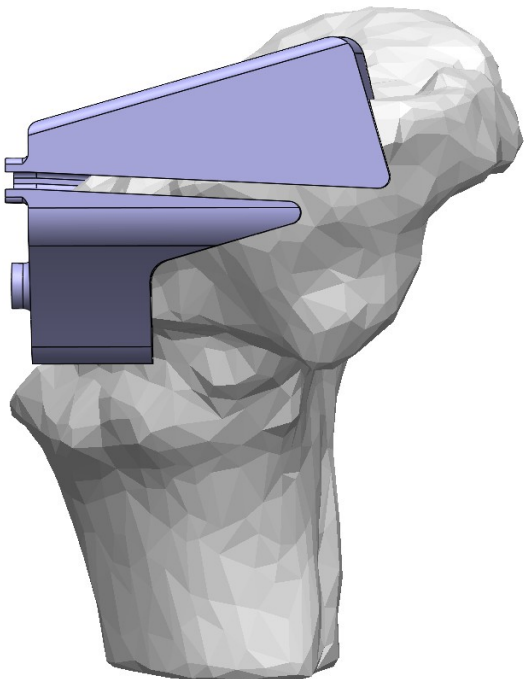

Guide de coupe – Option n°2

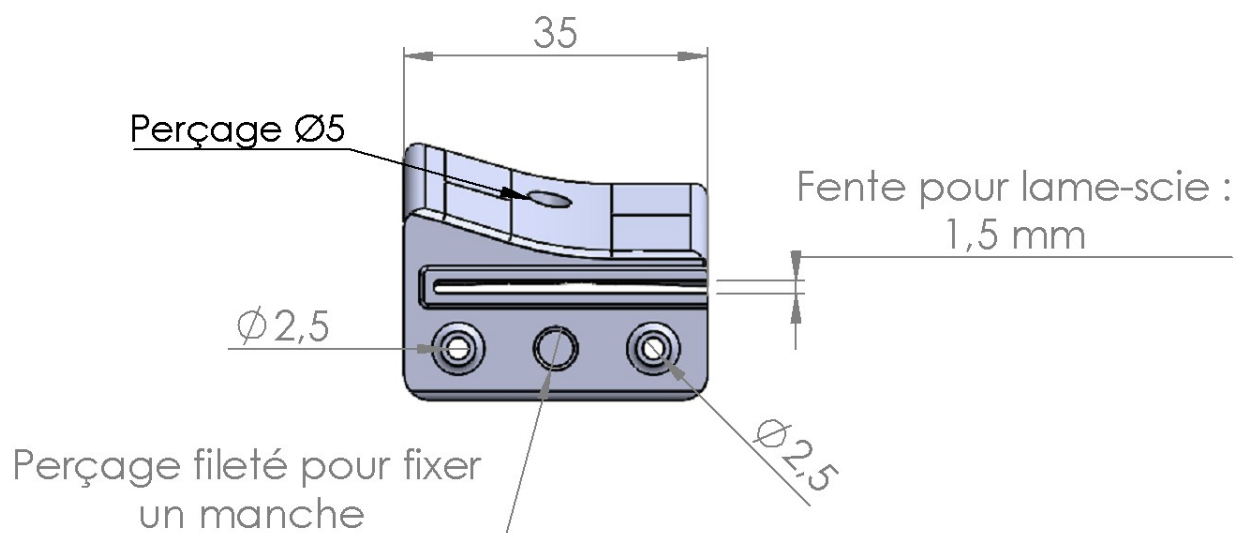


Vue antérieure

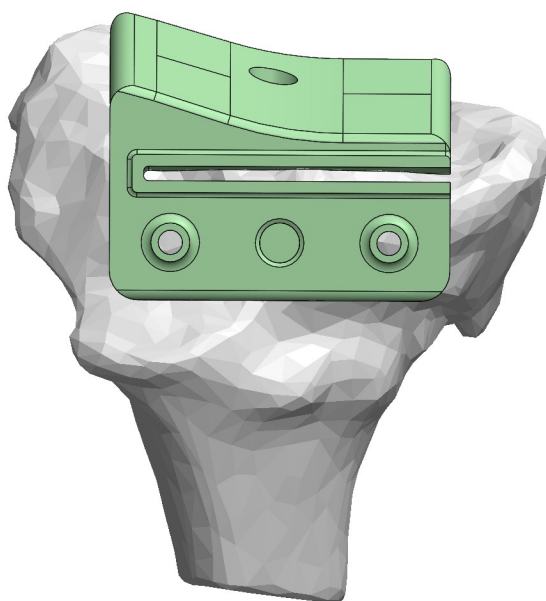


Vue postérieure



Vue externe

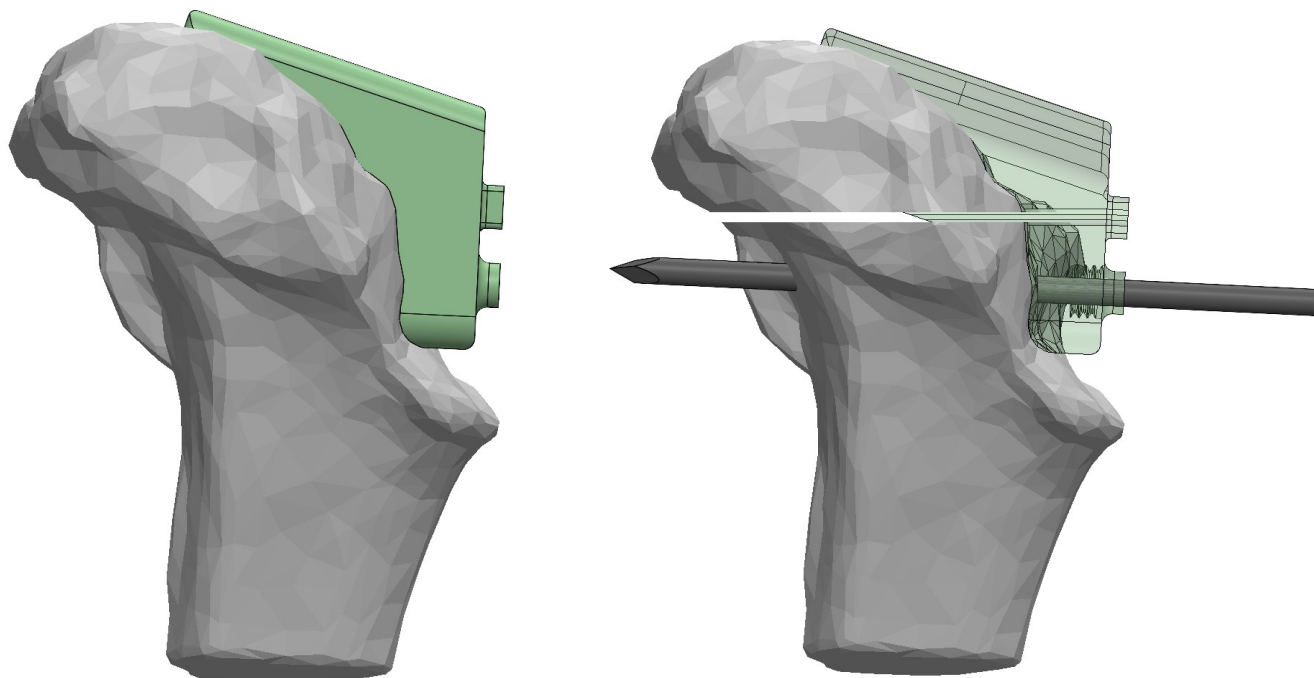


Vue interne

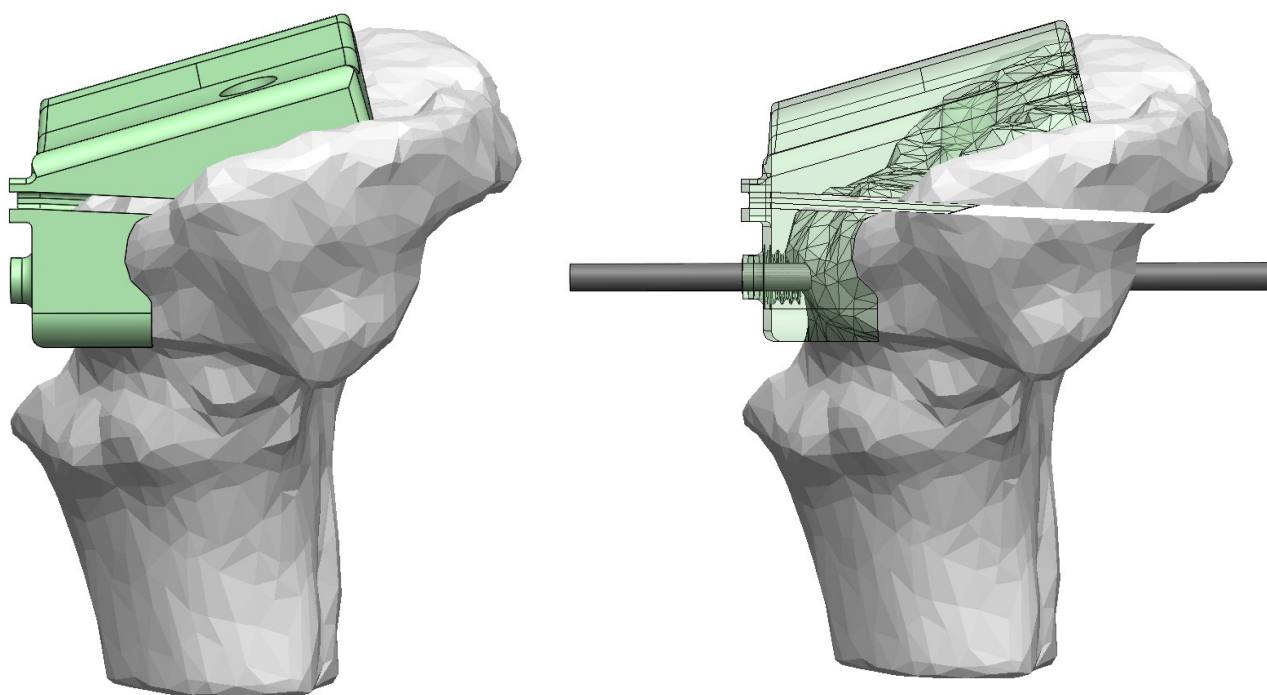

Montage

Option 1

Exemple du montage possible pour l'option 1, la tige centromédullaire en rouge est de $\varnothing 5$.

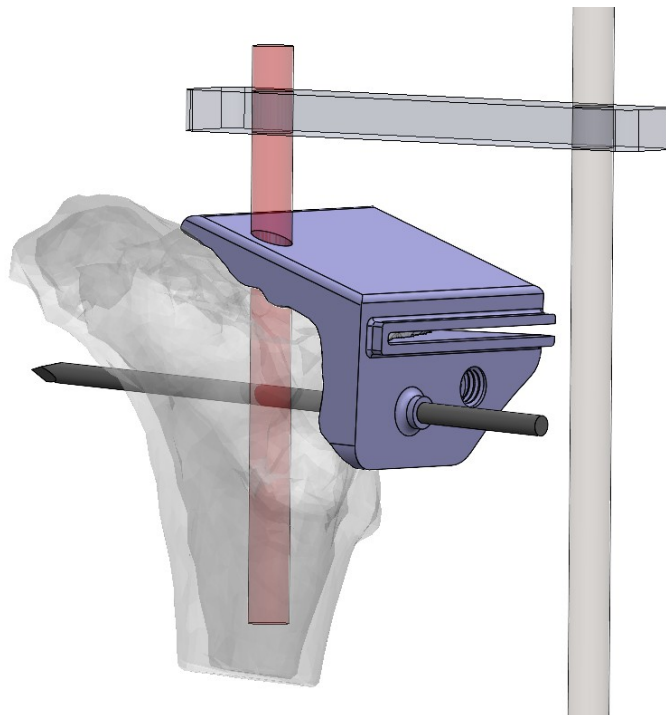

Option 2

